




Yellow Special

Finer guldlegering

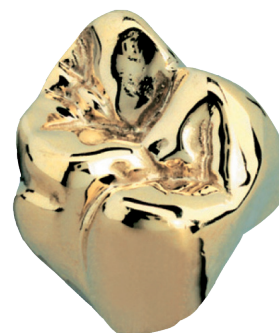

Indhold i %

Au + Pt Met	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ir	Ru	Andre
43,2	41,0	0,45	1,7	44,9	11,0	0,2	0,7	-	-	0,05	-

Farve:	Gul	
Vægtfylde:	12,5 g/cm ³	
Hårdhed HV:	Efter støbning	Hærdet
	165	260
0,2 % Strækgrænse:	400 MPa	440 MPa
Elasticitetsmodul:	90 GPa	
Thermisk udvidelse:	25 - 500°C	25 - 600°C
	-	-

Smelteinterval:	Solidus	Likvidus
	825°C	900°C
Forvarmetemperatur:	550 - 650°C max	
Brug af gammel støbekegle:	Der skal tilføres mindst 1/3 nyt metal	
Støbetemperatur:	1050°C - 1100°C	
Digle:	Grafit, keramik / glas	
Udglødning / Hærdning:	650°C / 10 min. Kyses i vand. 400°C / 15 min.	

Lodning: S.G. 750* / S.G.700*
*Cadmium-frit slaglod

Producent:



SWISS MADE