




Degulor®

Bøjletråd

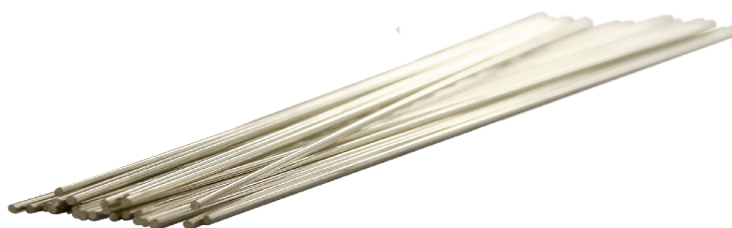

Indhold i %

Au + Pt Met	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	Ir
75,0	65,0	8,9	1,0	13,0	11,5	0,5	x

Farve:	Gul	
Vægtfylde:	14,7 g/cm ³	
Hårdhed HV:	Hærdet 310	Udglødet 210

Smelteinterval:	Solidus 890° C	Likvidus 1010° C
------------------------	--------------------------	----------------------------

Udglødning: 700° C / 10 min. Kyses i vand.

Hærdning: 450° C / 15 min.

Legeringen er selvhærdende efter afkøling i kyvette eller i loddeblok

Dimension: 1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm

Lodning: -

Producent: DeguDent GmbH