

Modelmaterialer - Indhold:

A			
Aislar isoleringsvæske	133	Miniflam.....	133
All Stone engangsartikulator	129	Modelsav	135
Argen	130	Modelstifter	134
Artikulator	130		
C		O	
Cyanolit lim	132	Orbix engangsartikulator.....	130
		Orbix forlænger.....	130
D		Orbix lim / aktivator.....	132
Diamantskiver til gips / akryl.....	134	Oxygen.....	133
E			
Engangsartikulator	129, 130	P	
F		Pindex	134
Flat engangsartikulator	130	Pins	134
Flexibol røreskåle	135	Plastic Pins.....	132
FuturaSep Plus.....	133	PremEco® Line.....	132
G		Profi-dent savklinger	135
Gas miniflam.....	133	Profi-dent systempins	134
Gipsskåle	135		
Gummisokkelforme	135	R	
I		Renfert ProFix modelstifter	134
Isolering af gips-gips/gips-akryl.....	133	Renfert sekundlim.....	132
K		Resimix bægere.....	135
Kerr Super Sep.....	132	S	
Kulzer Aislar	133	Sav	135
L		Sekundlim Renfert	132
Lim 132		Stifter.....	134
Loddebeskyttelsespasta.....	132	Systempins.....	134
M		U	
Metallex varmestop	132	Udrøringskåle	135
Micro Torch anlæg.....	133	V	
		Varmestop	132

Modelmaterialer

Engangsartikulator

All Stone engangsartikulator

- Enkel
- Præcis
- Tidsbesparende
- Kan også anvendes med modelstift-teknik



Find brugervejledninger for All Stone artikulatorer på www.dkdenaldepot.dk

4 lette trin til fremstilling af model og indstøbning ved brug af All Stone II fuldkæbe - og partiel artikulator og triple tray aftryk

Partiel All Stone artikulator
Fuldkæbe All Stone artikulator

50 sæt
50 sæt

Best. nr.

DE5702
DE5703

Hjælpeværktøj

Partiel Neo Ejector værktøj



Fuldkæbe FALCON Stone Ejector værktøj




DE5704

DE5705



3614 0000

Orbix engangsartikulator

- Bedre præcision
- Større bevægelsesfrihed
- Færre justeringer ved cementering
- Forenklet teknik
- Centreret låsesystem

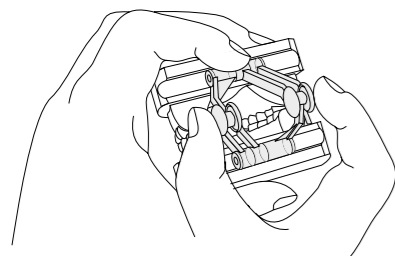

Orbix engangsartikulator

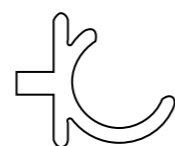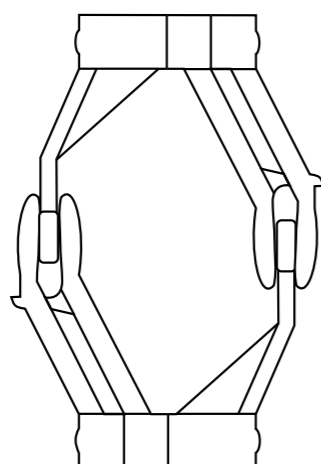

Orbix Adapter muliggør
anvendelse af sokkelbunde
fra andre systemer



Orbix forlænger

Orbix engangsartikulator
Orbix adapter
Orbix forlænger

100 stk.
200 stk.
200 stk.

Best. nr.
DE3278
DE3763
DE5708

Argen Flat engangsartikulator

Argen Flat artikulator
Argen Slot artikulator



100 stk.
100 stk.

DE9391
DE9392

All Stone Neo Partiel Artikulator

4 lette trin til fremstilling af model og indstøbning ved brug af All Stone Neo Partiel Artikulator og triple tray aftryk

Trin 1

Først fjernes overskydende aftryksmateriale fra skeen.

Fyld tilstrækkelig med gips ind i **Master** siden på aftrykket og håndvibrer tilstrækkeligt gips ned i artikulatoråbningen.

Forsigtigt vendes aftrykket ned på artikulatoren. Der rengøres rundt langs kanten, mens gipsen stadig er blød.

Trin 2

Når gipsen er afbundet fyldes tilstrækkeligt gips ned i den **Modsatte** side af aftrykket og håndvibrer tilstrækkeligt gips ned i artikulatoråbningen.

Luk artikulatoren sammen med den bløde gips til stoparmen **næsten** rammer den modsatte side. **VIGTIGT!!** Tryk ikke længere ned.

Der rengøres rundt langs kanten, mens gipsen stadig er blød.

Trin 3

Når gipsen er afbundet, fjernes aftryksskeen og modellerne trimmes ved brug af håndstykke.



Se videoinstruktion

Ejection method 1 & 2 på:

<http://youtu.Be/h46yothteu4>

Trin 4

Gipsmodellen fjernes fra basen.

Derefter saves modellen i sektioner som vanligt. Plastiktoppen skulle være faldet af artikulatoren, hvis den ikke er det, fjernes den fra basesiden med en pincet.

Når modellen er savet i sektioner, damprenses. Du er nu færdig med dit grundlæggende modelarbejde.

For at fjerne stamperne: træk fra toppen eller tryk fra bunden.



Husk! Opbevar altid lim i køleskab!


Lim**Renfert sekundlim**

Specielt velegnet til fiksering af system-modelpins samt til overfladeforsegling af gipsstamper.

Sekundlim 10 g 1733-2000

**Cyanolit lim**

Tyndtflydende og hurtigvirkende

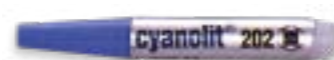

2 g DE3805

Orbix lim

Lim og aktivator

Orbix cyanakryl lim base 28 g DE3341
Orbix cyanakryl aktivator 2 oz DE3348**Loddebeskyttelsepasta**

Metallex varmestop



DE3398

Plastic Pins

Plastic pins klare



DE2879

Kerr Super Sep

• Til isolering gips/gips

Super Sep 500 ml DE1921

**PremEco® Line**

Alginat isolering

- Til isolering gips/akryl
- Formaldehydfri
- Anvendes til både varm og kold akryl



1 liter 1030077

Schütz FuturaSep Plus

- Til isolering gips/gips og gips/akryl
- Formaldehydfri
- Anvendes til både varm og kold akryl

Futura Sep Plus isoleringsvæske
Beholder til isoleringsvæske1000 ml
DE5072
DE5345**Kulzer Aislar**

- Til isolering gips/gips og gips/akryl
- Formaldehydfri
- Anvendes til både varm og kold akryl

Aislar isoleringsvæske
Aislar isoleringsvæske
Pensler til isolering80 ml
2000 ml
5 stk.
KU1001
KU1008
KU1386**Micro Torch anlæg**

Flammetemperatur 2.750 °C - størrelse på flamme kan varieres fra nåletykkelse og opefter i 4 forskellige varianter.

Sættet indeholder:

- Regulator til 1 fl. gas og 2 fl. oxygen
- 1 stk. manometer for oxygen
- Microbrænder og 1 sæt á 4 stk. kanylespidser
- 1 stk. holder til mikrobrænder
- 1 fl. gas á 40 g og 2 Oxygen



Micro Torch anlæg






DE5226

GasOxygen
Gas til Micro Torch anlæg (miniflam)

40 g

DE3159
DE3166

Profi-dent modelsystempins

			Best. nr.
Profi-dent systempins	kort		1000 stk. PR1282
Profi-dent systempins	mellem		1000 stk. PR1296
Profi-dent systempins	lang		1000 stk. PR1289
Profi-dent hylser			1000 stk. PR1275
Pindex bor PX 119			1 stk. DE2165
Pindex bor PX 119			pk. á 3 stk. DE2172


Renfert ProFix modelstifter

Profix modelstifter	1000 stk.	367-2000
---------------------	-----------	----------




Diamantskiver til gips / akryl

- Til adskillelse af stamper
- Hurtig og mere præcis end håndsav
- 10.000 omdr. / min.
- Tykkelse: 0,35 mm.

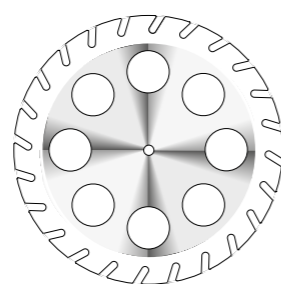

PR1912
Ø 30 mm

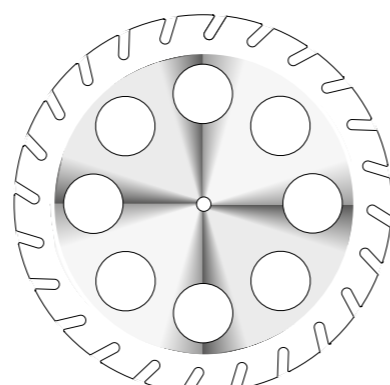


PR1905
Ø 45 mm

Profi-dent modelsav

Savens specielle design muliggør enkel og hurtig udskiftning af savklinge.

Profi-dent modelsav				
Profi-dent savklinger	medium	133 mm	10 stk.	PR1184
Profi-dent savklinger	medium	133 mm	100 stk.	PR1254
Profi-dent savklinger	007 fin	133 mm	10 stk.	PR2003
Profi-dent savklinger				PR1247

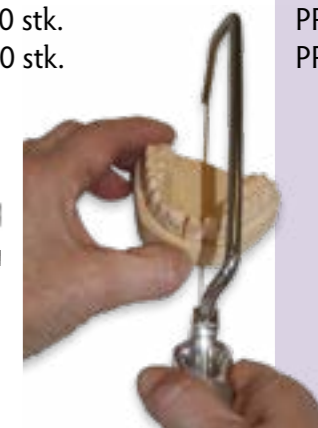

FLEXIBOL

Røreskål	xl	850 ml	
Røreskål	stor	500 ml	
Røreskål	mellem	300 ml	
Røreskål	lille	150 ml	



Resimix bægere

Tåler monomer



Scheu Resimix bæger	lille	5 ml	3 stk.	DE2501
Scheu Resimix bæger	mellem	30 ml	2 stk.	DE2508
Scheu Resimix bæger	stor	70 ml	1 stk.	DE2515

Gummisokkelforme

- Sikrer glatte og ensartede modeller
- Ingen brug af gipstrimmer
- To størrelser, lille og stor, overkæbe eller underkæbe

Gummisokkelform OK1, lille
Gummisokkelform OK2, stor
Gummisokkelform UK1, lille
Gummisokkelform UK2, stor



BE1228
BE1451
BE1458
BE1465

Gå til indholdsfortegnelsen

Se resten af kapitlerne fra
Indkøbskataloget på
www.dkdenaldepot.dk/katalog